


1. Eigenschaften

Der vierrädrige Rollator ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Er verfügt über solide Vorderräder mit 10 Zoll Durchmesser und Hinterräder mit 7,5 Zoll Durchmesser, höhenverstellbare Griffe mit anatomischen Griffen, Bremsen mit Parkfunktion, Sitz mit Rückenlehne und Tasche. Die Struktur basiert auf einem Crossover-Rahmen und einem ovalen Rohrquerschnitt, wodurch die Widerstandsfähigkeit gegen axialen Druck deutlich erhöht wird. Das versteckte Bremskabel sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild.

Das Set beinhaltet: Gestell mit Sitz, Vorder- und Hinterräder, Rückenlehne, Einkaufstasche.

Elemente des Rollators:

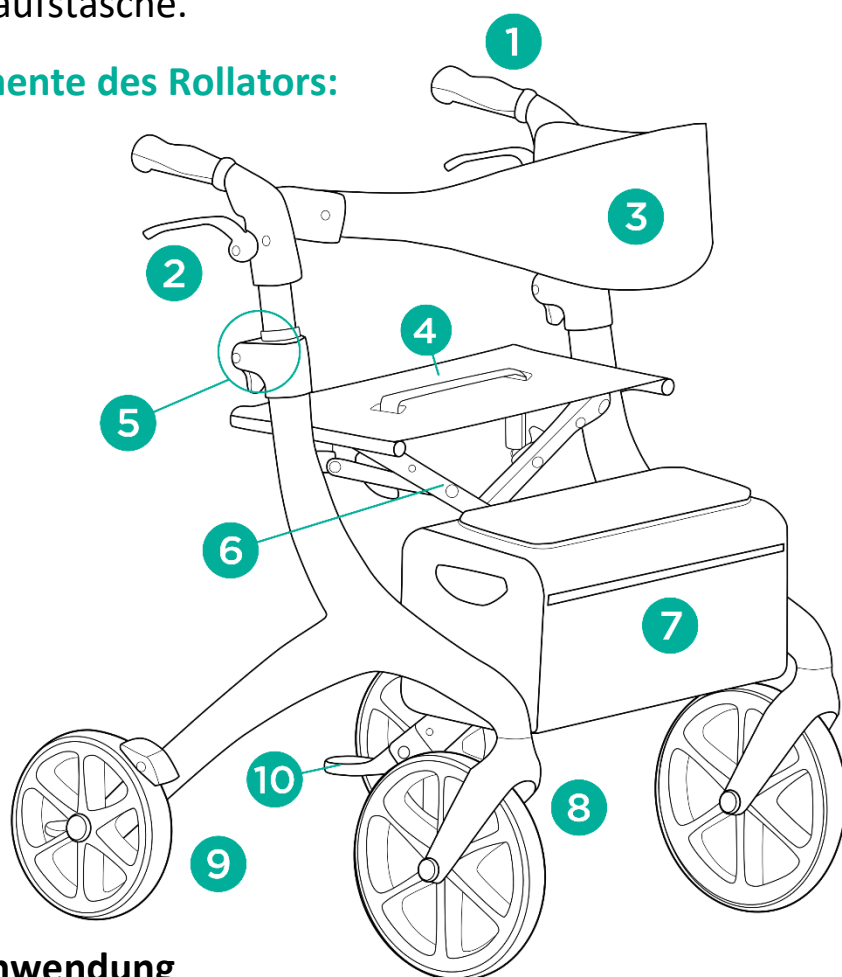

- 1 Handgriff
- 2 Bremse mit Feststellhebel
- 3 Rückenlehne
- 4 Sitz
- 5 Höhenverstellsperrhebel
- 6 Querlatte
- 7 Tasche
- 8 Vorderrad 10"
- 9 Hinterrad 7,5"
- 10 Stützpedal

2. Anwendung

Der Rollator ist für Patienten mit eingeschränkter Mobilität konzipiert, die beim Gehen eine stabile Stütze und Hilfe benötigen. Er wird auch älteren Menschen als Hilfe zur Balancehaltung empfohlen, um den Gehkomfort zu verbessern und die Sturzsicherheit zu gewährleisten. Die Verwendung des Rollators wirkt sich positiv auf die Rückkehr zur Aktivität von Menschen mit Bewegungsproblemen und

Aufstehproblemen aus. Er garantiert eine bessere Stabilisierung, Stütze und Sicherheit beim Gehen.

3. Zusammenbau

Entfaltung

- Um den Rollator aufzuklappen, greifen Sie beide Handgriffe und ziehen Sie diese nach außen. Drücken Sie den Sitz leicht auf beiden Seiten, um den Rollator vollständig aufzuklappen (charakteristisches „Klick“-Geräusch).

Falten

- Um den Rollator zusammenzuklappen, ziehen Sie den Sitz nach oben.
- Achten Sie darauf, dass der Rollator richtig zusammengeklappt ist.

Höhenverstellung der Handgriffe

So stellen Sie die Höhe des Handgriffs ein:

- Drücken Sie die Bremse nach unten, um die Feststellbremse zu aktivieren und den Rollator zu blockieren.
- Heben Sie die Einstellklemme nach oben.
- Passen Sie die Höhe des Griffs an.
- Durch Festziehen der Klemme wird die eingestellte Höhe der Griffe fixiert. Durch mehrmaliges Auf- und Abziehen des Griffs kann die korrekte Fixierung überprüft werden.
- Stellen Sie die Höhe des zweiten Handgriffs auf die gleiche Weise ein.

HINWEIS! Beide Handgriffe sollten auf die gleiche Höhe eingestellt sein.

Bremsfunktion

- Um den Rollator anzuhalten, ziehen Sie den Bremsgriff nach oben und halten Sie ihn gedrückt.
- Wenn Sie nicht in Bewegung sind oder den Sitz nicht benutzen, blockieren Sie die Feststellbremse mit der Feststellklemme, indem Sie den Bremsgriff nach unten ziehen.
- Um die Feststellbremse zu lösen, ziehen Sie den Griff nach oben.

Abnehmen und Anbringen der Rückenlehne und der Tasche

Tasche und Rückenlehne sind abnehmbar.

- Um die Rückenlehne zu entfernen, drücken Sie den Knopf oben an der Innenseite des Rahmens und ziehen Sie die Rückenlehne nach oben.
- Um die Tasche zu entfernen, ziehen Sie sie aus den Befestigungsöffnungen an der Unterseite des Rahmens nach oben.

- Um Tasche und Rückenlehne zu befestigen, wiederholen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

Stützpedal

- Das Stützpedal dient zum Überwinden von Hindernissen, wie zum Beispiel Bordsteinkanten. Durch Drücken des Fußes auf das Pedal wird der Rollator hochgehoben.

4. Technische Daten

Abmessungen nach dem Falten	70 x 15 x 86,5 cm
Gesamtbreite nach dem Ausklappen	58 cm
Gesamtlänge	87 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitzhöhe vom Boden	55 cm
Handgriff-Höhenverstellung	86,5-96,5 cm
Rollatorgewicht	7,50 kg
Maximale Kapazität	136 kg
Rahmenfarbe	dunkelblau

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Gehwagens, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Reinigung und Wartung

Kontrollieren Sie regelmäßig den technischen Zustand des Gehwagens:

- Reinigen Sie den Rahmen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn gründlich ab.
- Verwenden Sie keine starken Poliermittel, da dies die Schutzbeschichtung beschädigen kann.
- Befreien Sie bewegliche Teile des Gehwagens (Scharniere, Klemmschrauben, Verriegelungen) regelmäßig von Schmutz.

7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.
Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



11/2024 (I)